

TIENS

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Преносим Уред „CILVARIS“ TQ-D27



Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба, запазете го за бъдещи справки.

Адрес: No. 20, Xinyuan Road, Wuqing Development Zone, Tianjin
Пощенски код: 301700 Телефон: 4006-518-666 www.tiens.com

Изпълнителен стандарт: GB4706.1-2005 GB4706.15-2008

Производител: Shenzhen Zhenmei Asia-Pacific Technology Co., Ltd.
R&D Company: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd.
Address: No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, China
Postal Code: 301700; www.tiens.com

Създател на продукта: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd.
Адрес: No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, China
Пощенски код: 301700 www.tiens.com

Производител: Asia Pacific Perfect Technology Co., Ltd
Адрес: Floor 1 west, No. 13, Daxing Road 1st, Buyong Industrial area,
Shajing Road, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province

Дистрибутор: TIENS България ЕООД, София, бул. Т. Александров 28,
ет. 3, тел.: +359 2 483 67 14; www.tiens.bg

Благодарим ви, че използвате преносимия уред „CILVARIS“ TQ-D27
Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба и го запазете.

СЪДЪРЖАНИЕ

Описание на продукта

Предпазни мерки

Описание на продукта

Функции

Стъпки на използване

Ултразвуково почистване с постоянно напрежение (CV)

Режими за използване

Режим на радиочестота (RF)

Режим на електрическа мускулна стимулация (EMS)

Режим на постоянно напрежение (CV)

Авторежим

Параметри на продукта

ИМА НА ПРОДУКТА

Преносим уред „ SILVARIS “ TQ-D27

Описание на продукта

Режим	Функция и ефект
RF	Радиочестота (RF)+ светодиодна (Led) наночервена светлина
EMS	Електрическа мускулна стимулация (EMS) + светодиодна (Led) наносиня светлина
CV	Ултразвук с постоянно напрежение (CV)
RF	Режим автокомбинация Първо: Радиочестота (RF) + постоянно напрежение (CV) + червена светлина 7.5 минути Последно: Електрическа мускулна стимулация (EMS) + синя светлина 7.5 минути

Предпазни мерки

- Използвайте от ниско към високо ниво
- Не използвайте уреда в случай на неизправност! Това може да доведе до неблагоприятен ефект и е опасно. При повреда незабавно прекратете употребата на уреда.
- Не използвайте, ако по кожата имате обрив, възпаление, сърбеж или други аномалии.
- Хората на стоматологично лечение, трябва да внимават да избягват пряк контакт с уреда.
- Не използвайте, ако уредът падне или понесе щети при удар
- Не забърсвайте уреда с разтворители като алкохол, разреждател, бензин и лак за нокти. Това може да повреди повърхността на устройството.
- Не го използвайте дълго време на едно и също място.
- При употреба, следете състоянието на кожата.
- Не е подходящ за: хора с алергичен контактен дерматит, с кожни заболявания, за бременни, за жени в менструален цикъл, за страдащи от парализа или сензорно увреждане, за пациенти с костни заболявания и др.
- Пазете уреда и основата за зареждане сухи.
- Този уред не е предназначен за използване от лица с намалена подвижност, липса на енергия или от неопитни лица, включително деца, освен ако не са наблюдавани или насочвани от опитно лице, за да се гарантира тяхната безопасност.
- Свързването на вода и електричество е опасно. Така че, моля, не използвайте безжично зареждане във влажна среда като душ кабина или плувен басейн.
- Този продукт трябва да се използва заедно с лосион / крем.
Деца под 14 години не могат да го използват.

Опасност

*** Моля, не използвайте при следните условия, в противен случай това ще доведе до повреда на устройството:

- Изкуствени бели дробове и други устройства, имплантирани в тялото


- Пейсмейкъри
- Електрокардиографи и други портативни устройства

Метал, поставен в тялото

*** За да избегнете злополука или нараняване, не използвайте следните зони на тялото:

- Над брекетите
- Области, които са претърпели козметична хирургия
- Клепачи, очни ябълки или зоните около очите
- Над порезни рани
- При инфекциозни или други заболявания, консултирайте се с лекар преди употреба

Описание на продукта

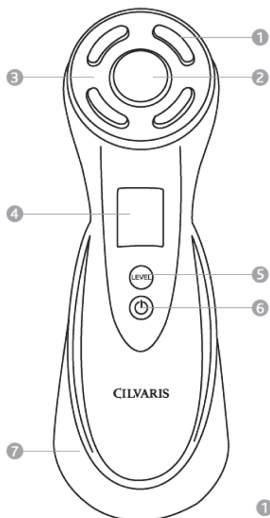

- 1 Радиочестотна глава (RF) / глава за електрическа мускулна стимулация (EMS)
- 2 Глава за ултразвук с постоянно напрежение (CV)
- 3 Светодиодна (Led) наночервена/ синя светлина
- 4 Светодиоден (Led) дисплей
- 5 Потвърдете функцията/ регулирайте нивото
- 6 Функция за включване/ изключване/превключване
- 7 Основа за безжично зареждане

Функции

Дисплей	Интерфейс/ниво (Моля, регулирайте нивото според собственото си усещане)					
RF	RF изключена	RF ниво 1	RF ниво 2	RF ниво 3	RF ниво 4	RF ниво 5
EMS	EMS изключено	EMS ниво 1	EMS ниво 2	EMS ниво 3	EMS ниво 4	EMS ниво 5
CV	CV изключено	CV – включено включено				
AUTO	AUTO изключено	AUTO – включено включено				

1. Натиснете за 2 секунди за включване, натиснете 2 секунди за изключване.
2. Когато RF мига натиснете, за да превключите на EMS, CV, AUTO.
3. Когато RF мига, натиснете веднъж, за да потвърдите тази функция.
4. След потвърждаване на функцията, натиснете веднъж, за да потвърдите ниво 1, два пъти - за ниво 2, три пъти – за ниво 3, четири пъти - за ниво 4 и пет пъти – за ниво 5.


Стъпки за използване на уреда

Зареждане (Моля, уверете се, че устройството има достатъчно енергия преди употреба)

1. Поставете устройството на основата, свържете захранването и започнете да зареждате. Нужни са около 6 часа, за да се зареди уредът напълно.
2. При първото зареждане се препоръчва да зареждате уреда в продължение на 6 часа. В уреда има вграден интелигентен контрол за безопасност, така че, от съображения за сигурност, той не може да се включи и използва докато се зарежда.

Стъпка 1----- Почистване

Премахнете грима и почистете лицето си с почистващ продукт или използвайте режим CV за почистване на лицето. Поставете памука, като следвате показаните стъпки и използвайте препарат за грим.

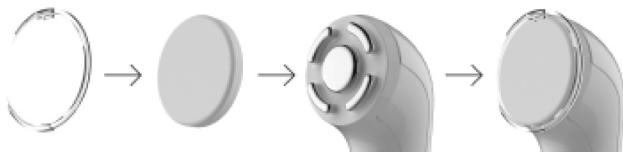

- Пръстен за фиксиране на памука
- Памук
- Съответната глава на уреда
- Готово

Начини на използване на режима за почистване с ултразвук с постоянно напрежение

- ① Поставете памука върху главата на уреда и го фиксирайте с пръстена
- ② Сипете препарат за грим върху памука и се уверете, че целият памук е напълно мокър.
- ③ Включете --- Изберете режим CV.
- ④ Дръжте уреда и се уверете, че цялата глава прилепва добре към кожата. Започнете да го движите върху лицето си, както е показано на следващата снимка, като започнете от точка едно и стигнете до точка б. Трябва да направите това и от другата страна на лицето. По време на масажа памукът ще изсъхне и ще е трудно да движите главата на уреда. Изсипете върху памука още препарат за почистване на грим, за да го поддържате мокър.
- ⑤ След почистване, махнете памучния пръстен и памука. Почистете главата на оборудването с чиста хавлиена кърпа или салфетка и преминете към следващите стъпки.



Стъпка 2 ----- Поставяне на крем, лосион и др.

Според предпочетения режим и типа кожа изберете подходящ продукт

№.	Режим	Функция	Примери за продукти за грижа за кожата
1	RF	Радиочестота (RF) + Светодиодна (LED) наночервена светлина	Есенция / Емулсия / Гел
2	EMS	Електрическа мускулна стимулация (EMS) + Светодиодна (LED) наносиня светлина	Гел / Емулсия / Крем за лице / Маска с лека текстура
3	CV	Ултразвук с постоянно напрежение (CV)	Емулсия / Крем (режим на почистване с използване на препарат за прехване на грим)
4	AUTO	Радиочестота (RF) + Постоянно напрежение (CV) + червена светлина 7.5 минути Електрическа мускулна стимулация (EMS) + синя светлина 7.5 минути	Продукти с лека текстура - маска и др.

Забележка: Поради разликата в качеството на кожата, горното съчетание е само за справка. Това не е твърдо изискване.

Стъпка3 ----- Включване на устройството (Методи на работа)

Съвети: Моля, използвайте от ниско до високо ниво

- ① Включете устройството, уверете се, че цялата глава на уреда докосва добре кожата ви. Започнете внимателно да движите уреда. **(Забележка:** При използване на RF режим, главата на уреда не може да остане на едно и също място в продължение на повече от 5 секунди).
RF, EMS, CV режим: Напомняне на всеки 5 минути, автоматично изключване след 15-минутен масаж.
- ② Почистете лицето си: След масажиране, отстранете излишния крем. Използвайте хавлиена кърпа или вода, за да почистите лицето си. Почистете устройството: Може директно да го измиете, подсушете го с чиста хавлиена кърпа или със салфетка.
- ③ Използвайте преносимия уред „Тайна красота“ за масаж.

Радиочестотен (RF) режим: Използвайте от ниско към високо ниво

Използвайте с продукт: Есенция/ Емулсия/ Гел



- ① Движете уреда от средата на челото към лявата и дясната страна.



- ② Движете уреда от вътрешния към външния ъгъл на окото.



- ③ Движете уреда от средата на лицето към крайната/външната част.



- ④ Движете уреда от долната към горната част на лицето, от горната част – към долната.

Режим електрическа мускулна стимулация (EMS) – микро ток: Използвайте от ниско към високо ниво

Използвайте с продукт: Гел / Емулсия / Крем за лице / маска с лека текстура



- ① Повдигнете кожата от двете страни на устата и се придвижете отдолу нагоре.



- ② Нанесете малко продукт върху лицето, движете устройството леко и без да спирате.

Режим ултразвук с постоянно напрежение (CV)

Използвайте с продукт: Емулсия / Крем (режим на почистване с използване на препарат за премахване на грим)



- ① Движете уреда от средата на лицето към крайната/външната част.



- ② Движете се леко от двете страни на носа към средната част на лицето.

Авто (AUTO) режим (комбинация)

Радиочестота (RF)+ постоянно напрежение (CV)+ червена свелина 7.5 минути след Електрическа мускулна стимулация (EMS) + синя светлина 7.5 минути



- ① Движете се от средата към външната част на шията. Насочете се от долу нагоре, за да стимулирате масажната циркулация на шията.



- ② Движете от средата на лицето към крайната/външната част или от външната част към средата, без да прекъсвате.

- ③ Масажирайте леко според горните стъпки.

Автоматично изключване

Уредът ще се изключи 15 минути след включване. Задръжте продължително ON/OFF бутона, ако желаете да продължите.

Уредът ще издаде звуков сигнал след използването на даден режим в продължение на 5 минути.

Водоустойчив

- Основният модул е еквивалентен на IPX6 Waterproof. Този продукт може да се почиства с вода, но се уверете, че захранването е изключено.
- Стойката за зареждане не е водоустойчива.
- Нормално е уредът да е горещ по време на зареждане.

Параметри на продукта

Име на продукта: Преносим уред „ CILVARIS “ TQ-D27

Номинално напрежение: 7.4 V

Номинален ток: 1000 mA

Номинална мощност: 7.4 W

Зарядно напрежение: 9.0 V

Зареждащ ток: 1.0 A

Начин на зареждане: Безжично зареждане

Време за зареждане: <6 часа

Време за използване: Препоръчителни 15 минути (захранването ще се изключи 15 минути след включване)

* След 5-минутно използване на даден режим, уредът ще издаде напомнящ звуков сигнал

Време за използване: <60 минути (за една функция)

Функция: RF ----- 1MHZ (5 нива)

EMS ----- 5 нива

CV ----- 5 MHz

LED ----- червена \ синя

Друга функция: LCD дисплей

TIENS

TIENS България

София, бул. Тодор Александров 28, ет. 3

тел. +359 884 173 341; +359 2 483 67 12

e-mail: office@tiens.bg

Facebook: ТИЕНС България/ TIENS Bulgaria

<http://www.tiens.bg>

Instagram: TIENS Bulgaria